



Conozca el dispositivo auditivo y los accesorios.

1 Dispositivo auditivo

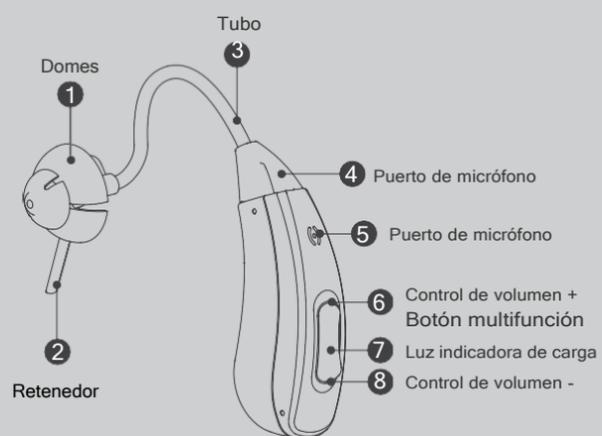

2 Base de carga

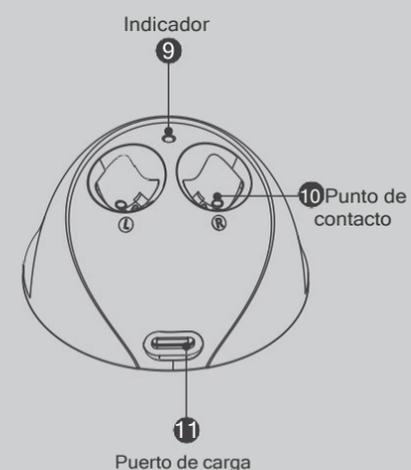

3 Sobre la cúpula

Cúpula mágica



Reduce eficazmente el efecto de oclusión y el silbido.


Cúpula superior redonda (mejora de potencia)




Reduce eficazmente el sonido de retroalimentación / silbido.

Cómo ensamblar y usar sus dispositivos


4 Cómo montar

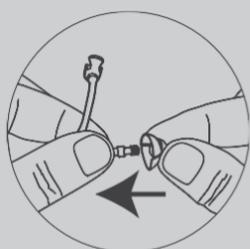

Paso 1  
Elige una cúpula

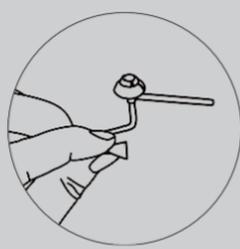

Paso 2  
Presione firmemente en el conector del tubo

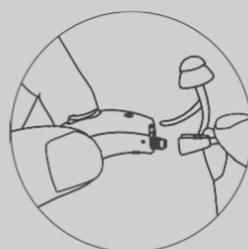

Paso 3  
Atornille el tubo en el conector del dispositivo auditivo



Paso 4  
Montaje completo

5 Cómo usar




Paso 1  
Coloque el aparato sobre la oreja



Paso 2  
Inserta la cúpula




Paso 3  
Coloque el retenedor

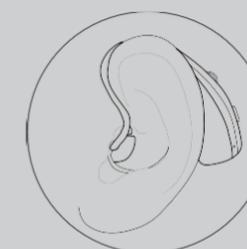


Paso 4  
Posición del ajuste final

Cómo cargar los dispositivos


6 Cargue los dispositivos

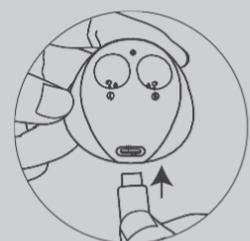


Paso 1  
Enchufe el extremo pequeño del cable en carga

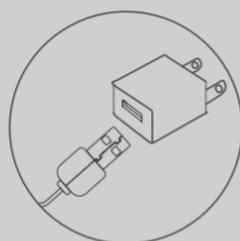

Paso 2  
Enchufe el extremo grande del cable al adaptador

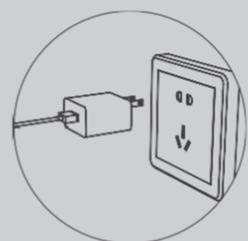


Paso 3  
Conectar a la corriente

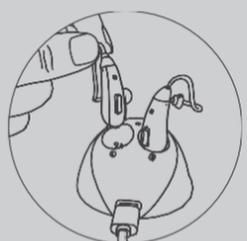

Paso 4  
Conectar los dispositivos en su base de carga

7 Indicador

\* Botón AZUL luz al cargar.

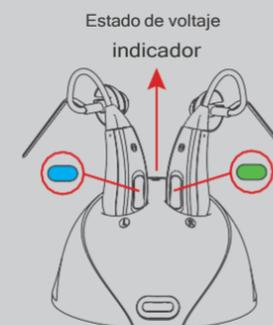

\* Botón VERDE se enciende cuando está completamente cargada.

Tiempo de carga	2,5 - 3 horas
Tiempo de uso	≤15 horas

Aviso:

- 1) El indicador de la base de carga se iluminará en verde cuando esté cargado. Cuando aparezca en rojo significa falta de carga.
- 2) Coloque siempre su dispositivo auditivo en la estación de carga cuando no lo utilice.
- 3) Le recomendamos encarecidamente que cargue completamente los dispositivos cuando los reciba por primera vez.


## Cómo usar los dispositivos

### 8 Interruptor encendido / apagado

Mantenga presionada la parte superior del interruptor basculante sobre unos 3 segundos.

El dispositivo está equipado con la función de retardo de encendido, por lo que necesita unos segundos para comenzar.


Cuando el dispositivo está encendido, parpadeará en verde, y cuando se apaga, parpadeará en azul.

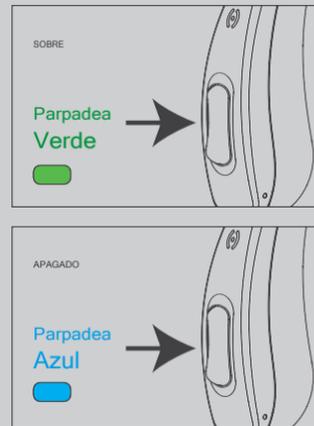

### 9 Control del volumen

El interruptor basculante se utiliza como control de volumen. Al presionar la parte superior del interruptor aumenta el volumen, mientras que la parte inferior lo disminuye.


A medida que aumenta o disminuye el volumen, escuchará un pitido que indica cada nivel de sonido.

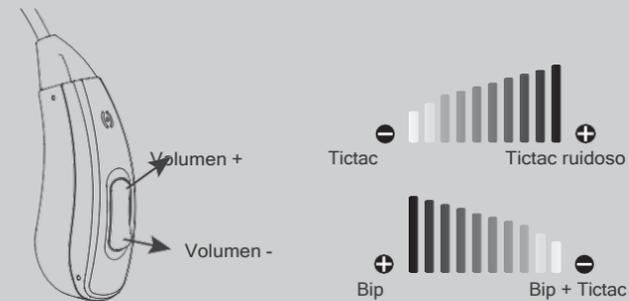

## Cómo usar los dispositivos

### 10 Interruptor de memoria

Cuando el dispositivo auditivo esté ENCENDIDO, volverá al programa anterior y a su volumen original. Mantenga presionada la parte inferior del interruptor basculante para cambiar los programas de escucha.

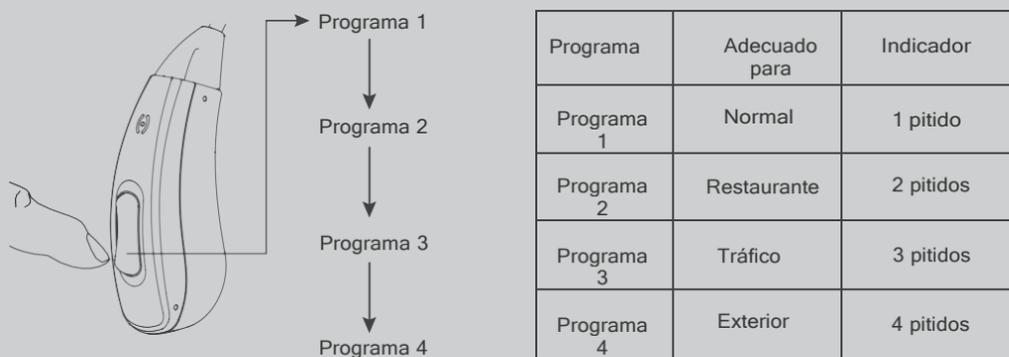

### 11 Cómo usar la aplicación

**Paso 1:** Úselo en su dispositivo y enciéndalo

**Paso 2:** Habilite el Bluetooth en su teléfono.

**Paso 3:** Busque el dispositivo.

**Paso 4:** Toque para conectar su dispositivo con su teléfono.

**Paso 5:** Puede ajustar el volumen, cambiar el programa de escucha y muchos ajustes personalizados a través de la APLICACIÓN.

Por favor, consulte el manual de la aplicación para un mejor uso.



## Mantenimiento


### 12 Solución de problemas

Amplificación de sonido baja o nula	
CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
Batería baja	Cargar el dispositivo
Cera acumulada en la cúpula	Limpiar la cúpula o reemplazar la cúpula vieja
Cera de oído excesiva	Consulte a su médico
Inserción incorrecta de la domes	Vuelva a insertar la cúpula
Dispositivo auditivo dañado	Comuníquese con su proveedor
Cambio de audición	Comuníquese con su audioprotesista
Silbidos o comentarios	
La cúpula tiene un tamaño incorrecto o está dañada	Reemplazar con una cúpula nueva o que se ajuste mejor
Inserción incorrecta de la domes	Vuelva a insertar la domes en su oído de modo que quede al ras con la pared del canal auditivo

### 13 Cuidado (Debe inspeccionar y limpiar su dispositivo auditivo todos los días).


#### 1. Limpiar el exterior

Para limpiar, frote suavemente la superficie con un paño suave y seco. Mantenga el contacto de carga y el puerto de carga limpios y secos. Se recomienda usar un deshumidificador o una caja seca electrónica para secar todos los días para reducir la humedad y la acumulación de cera.

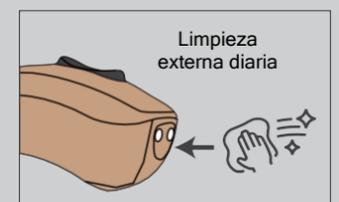

#### 2. Limpiar el tubo y la cúpula

Utilice un cepillo y un paño para limpiar la domes. Pase el cable de la herramienta de limpieza a través del conector del tubo y sáquelo de la punta. Limpie el extremo del cable y repita según sea necesario para eliminar la humedad y la suciedad del tubo.

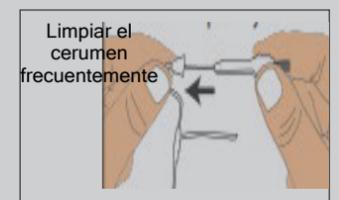

No permita que entre agua o líquido en las aberturas.